

Tirette de toilette

400-100
Système Éclipse

Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45. et RJ12
- Montage sur boîte électrique standard 1 groupes (1 X BC1004-L).
- Cordon d'appel antibactérien .
- Bouton d'annulation en silicone rétro éclairé.
- Mode Auto-diagnostique.
- Technologie à l'épreuve des éclaboussures.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)



Fonctionnalités

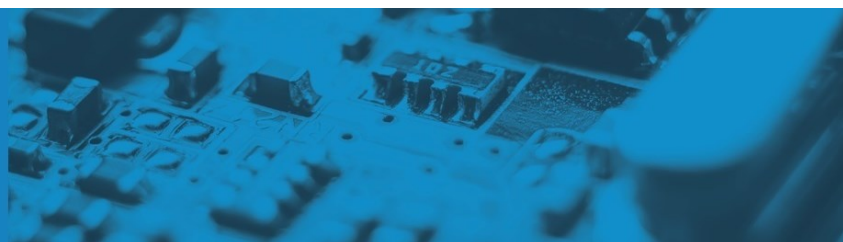
Le patient peut placer un appel via le poste de toilette jusqu'aux postes infirmières à l'aide d'un cordon d'appel qui nécessite une faible force d'activation.

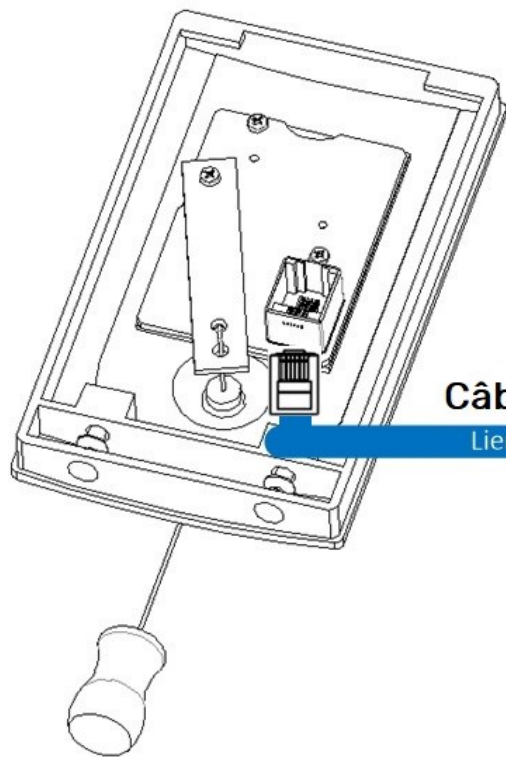
L'appel peut être interrompu en appuyant sur la touche d'annulation rétro éclairée.

Le poste de toilette peut être installé dans les douches car il est à l'épreuve des éclaboussures.

L'installation est facile grâce au simple connecteur RJ12 qu'il faut brancher à un câble CAT 5/5e/6 jusqu'au poste de chambre ou multifonction.

Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage

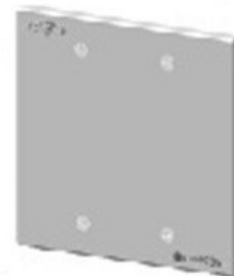



Câble CAT5e/6

Lien poste toilette/urgence


400-170 ou 400-171

**Voyant
Multifonction**

**Poste de
chambre
400-05x**

**Station
Multifonction
400-235**

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 100mW
Fixations	Boite électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre
Luminosité	Blanc LED : 520 mcd (1.9 Lumens)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0 Bouton d'annulation en silicone translucide rétro éclairé
Cordon d'appel	Matériel antibactérien Force d'activation : 0.4Kg Longueur : 24 pouces
Dimensions	4.7" (119 mm) Haut. x 2.8" (71 mm) Larg. x 0.5" (12.9 mm) Prof.

