

Poste d'appel avec jack et annulation

400-130
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et de la connexion RJ12.
- Montage sur boîtier électrique 1 groupe standard (1 X BC1004-L)
- Mode auto-diagnostique.
- Bouton d'annulation en silicone rétro éclairé.
- Jack ¼ standard permettant la connexion d'une poire d'appel standard.
- Technologie à l'épreuve des éclaboussures.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Ce poste peut être installé à une certaine distance d'un poste de chambre ou d'une station multifonction.

Il permet à un patient de placer un appel jusqu'aux postes infirmières à l'aide d'une poire d'appel standard (non incluse).


L'appel peut être interrompu localement en appuyant sur la touche d'annulation rétro éclairée.

L'installation est facile grâce aux simples connecteurs RJ12 qu'il faut brancher à un câble CAT 5e/6 jusqu'à la station multifonction ou au poste de chambre.

Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage.

Le poste est à l'épreuve des éclaboussures.



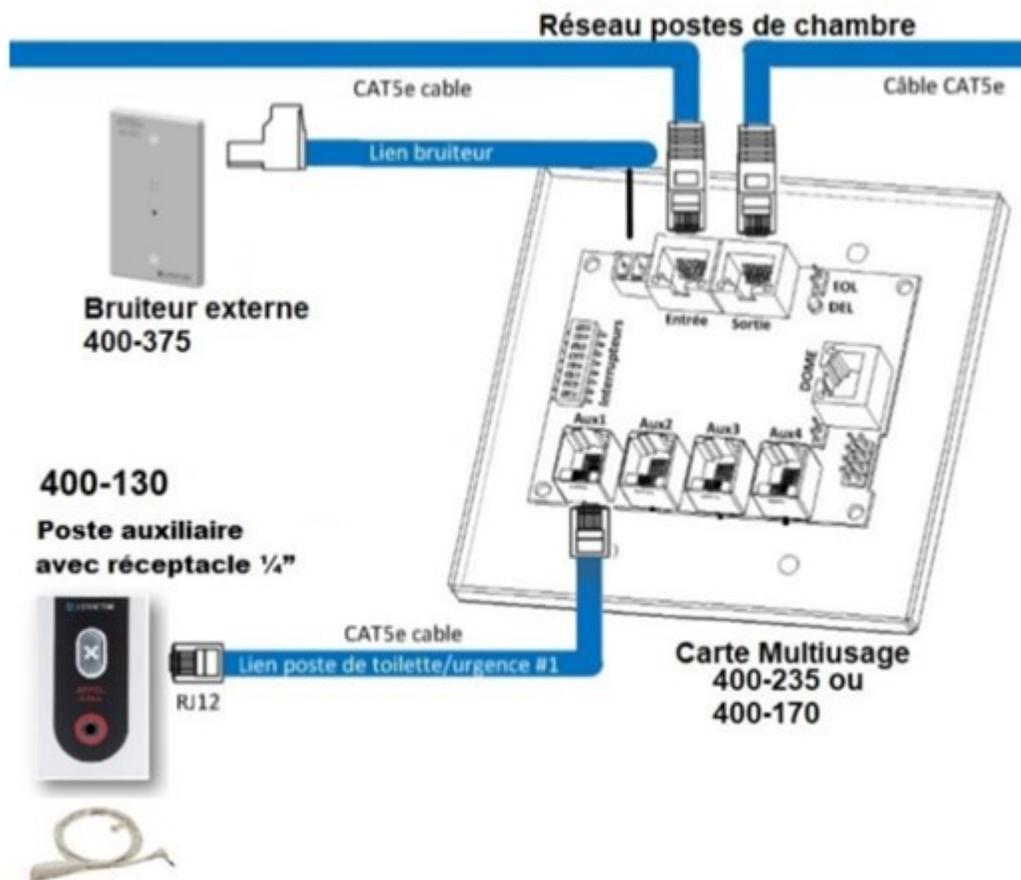

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 100mW
Fixations	Boîte électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre
Luminosité	Blanc LED : 520 mcd (1.9 Lumens)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0 Bouton d'annulation en silicone translucide rétro éclairé
Cordon d'appel	Connecteur de type jack 1/4 standard.
Dimensions	4.7" (119 mm) Haut. x 2.8" (71 mm) Larg. x 0.5" (12.9 mm) Prof.

Depuis septembre 2019, la station 400-130 est supportée par les postes de chambre 400-050 et 400-055 disposant de la version micro-logicielle (firmware) V41 ou plus.

